


Nabelklemmen

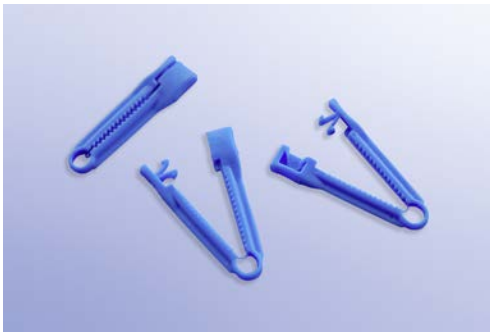

REF: 07.044.00.000

Produktgruppe: Sterile Nabelklemmen

Verwendungszweck:

Die Nabelklemme dient dem sicheren Verschluss der postnatal durchtrennten Nabelschnur beim Neugeborenen. Die Nabelklemme verbleibt bis die Nabelschnur von alleine abfällt.

Produktbeschreibung:

Die Nabelklemme besteht aus zwei gezahnten Armen. Die Arme sind auf einer Seite geschlossen miteinander verbunden. Die offene Seite verfügt über einen Verschluss, der nach einem hörbaren Einrasten, ohne Hilfsmittel, nicht mehr zu öffnen ist.

Sterilität: Ja

REF	ABE_MENGE	ABE_GTIN	VPE_MENGE	VPE_GTIN
07.044.00.000	100 Stck	04034342046316	600 Stck	04034342367633

Material

Produkt	POM
Verpackung	PP/PE, Papier, PE, Wellpappe
Latex	Nein
DEHP/BBP/DBP	Nein

Weitere Informationen

Regulatorische Grundlagen	Richtlinie 93/42/EWG
Benannte Stelle	TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
Klassifizierung	Is
UMDNS	10-876
eClass	34280104
Hersteller	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Einmalprodukt	Ja
Sterilisation	EO-Gas
Haltbarkeit	3 Jahre
Gebrauchsanweisung	Ja